

# ICARA<sup>®</sup> Radiuskopf- prothese



# Bipolare Radiuskopfprothese

Das **ICARA®** System ermöglicht eine präzise intraoperative Anpassung und Feinjustierung der Prothesenlänge, um eine optimale Gelenkspannung und Stabilität zu gewährleisten.



## Distalisierung des Rotationszentrums

physiologische Bewegung durch Verschiebung des Drehzentrums auf Höhe der Tuberositas radii




## Verschiedene Schaftoptionen

zementierte und zementfreie Schäfte mit variabler Krughöhe zur Vermeidung von Schaftabsenkungen



## TiN-Beschichtung

optimierte Benetzbarkeit und minimierte Metallionenfreisetzung an der Artikulationsfläche

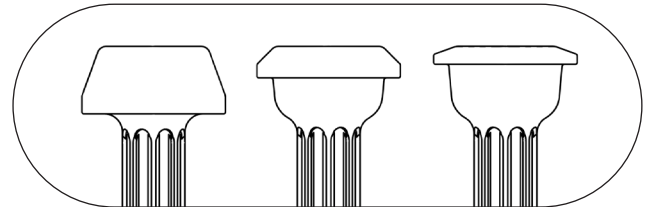



### Stufenlose Längeneinstellung

Vermeidung von Overstuffing oder Gapping



### Multidirektionale Selbstjustierung

Minimierung von Kraftspitzen auf das Capitulum humeri durch optimale Ausrichtung des Kopfes



walk with us

**implantcast GmbH**

Lüneburger Schanze 26  
21614 Buxtehude  
Deutschland

Tel.: +49 4161 744-0  
Fax: +49 4161 744-200

[info@implantcast.de](mailto:info@implantcast.de)  
[www.implantcast.de](http://www.implantcast.de)

CE 0482

